

项目评分

0/25

数据异常

静态站立评分

本次评估显示您的足弓结构在正常范围内，但右足略有扁平趋势，可能影响站立时足底减震和支撑效率。左右脚受力非常对称，重心控制良好。站立稳定性的核心指标（COP轨迹长度）处于短、稳定的水平，说明您在日常站立时姿势控制能力较好，跌倒风险较低。建议继续保持规律活动，并注意足部舒适，每半年至一年回访观察变化。

足底接触面积仅 27.9 cm²，远低于双脚站立应有面积


基本信息与足弓指标

OneStep Report

1	足弓指数(AI)	L	R
	L: 正常足弓 / R: 扁平足	0.247	0.293
2	足长(cm)	L	R
		22.50	23.90
3	足宽(cm)	L	R
		12.70	15.50
4	全足面积(cm ²)	L	R
		119.56	123.48
5	前足面积(cm ²)	L	R
		66.64	52.92
6	中足面积(cm ²)	L	R
		27.44	31.36
7	后足面积(cm ²)	L	R
		25.48	39.20
8	前足压力(%)	L	R
		49.1	38.6
9	中足压力(%)	L	R
		20.4	23.1
10	后足压力(%)	L	R
		30.5	38.3
11	COP距整体中心(cm)	L	R
		14.33	14.40
12	左右脚前后差(cm)	L	R
		-0.63	-


足弓区域分布图

Arch Zone Distribution

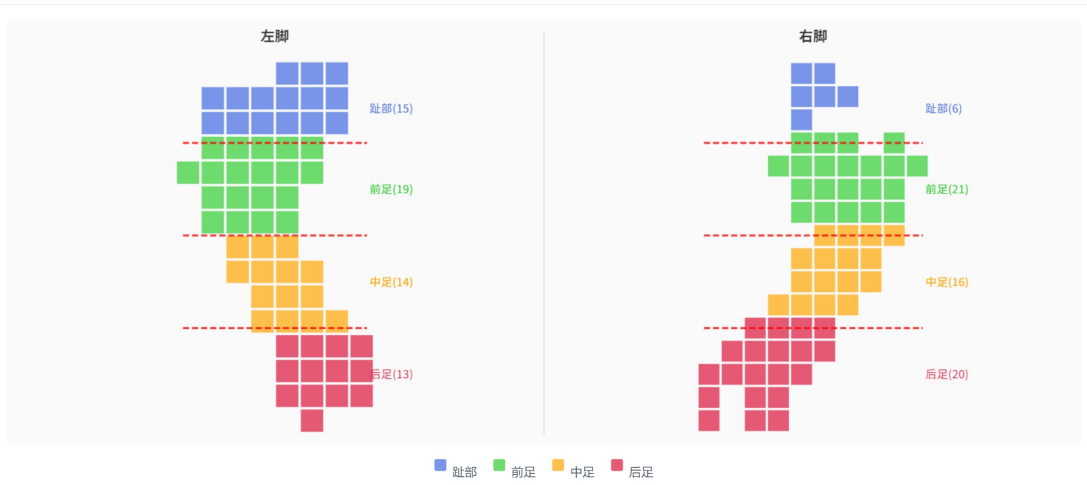


区域压力分布

Regional Pressure Distribution

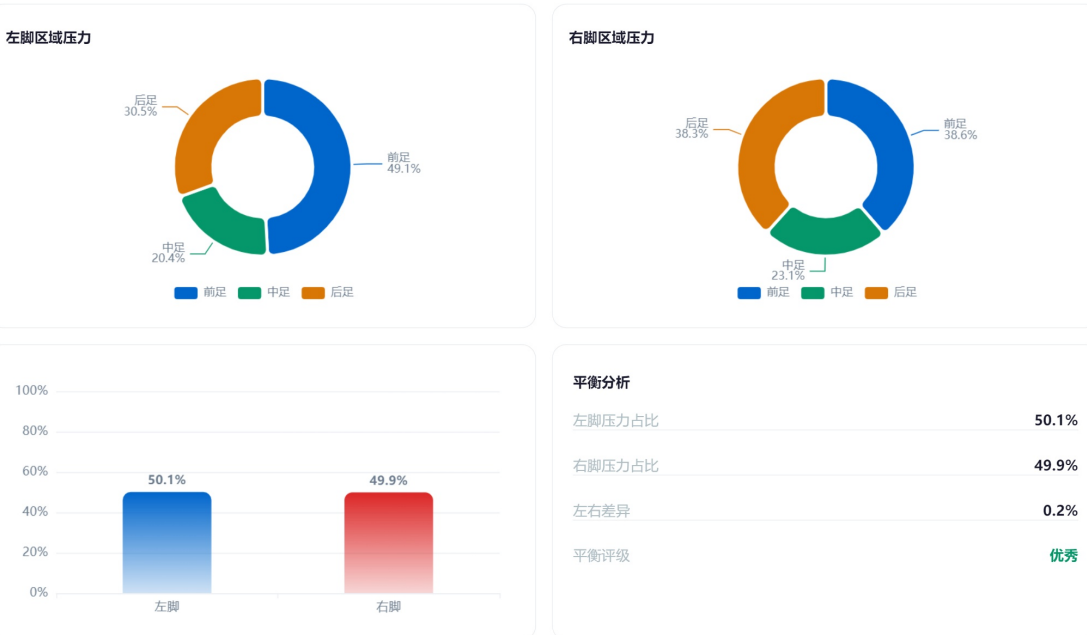


COP 压力中心轨迹

COP Trajectory with Heatmap

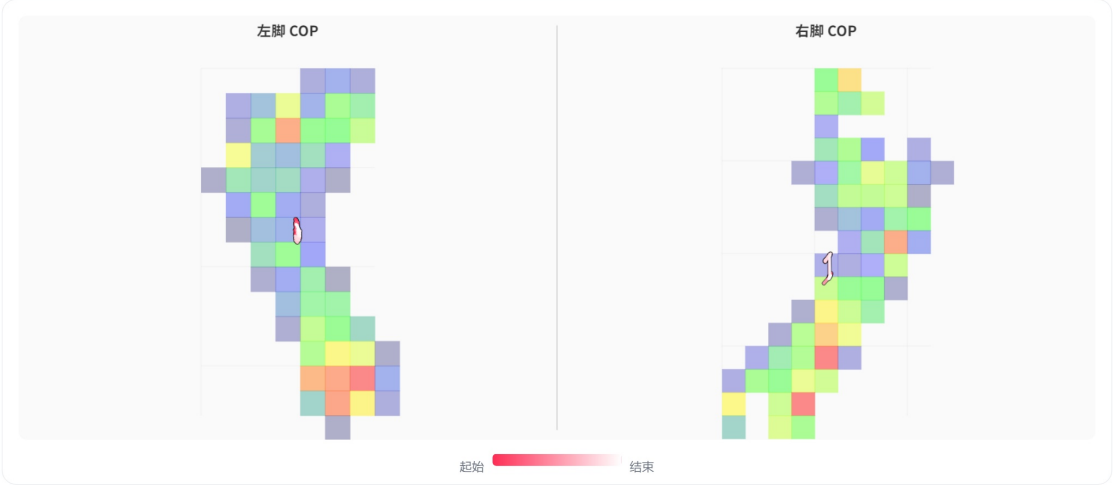

COP 速度时间序列

COP velocity time series

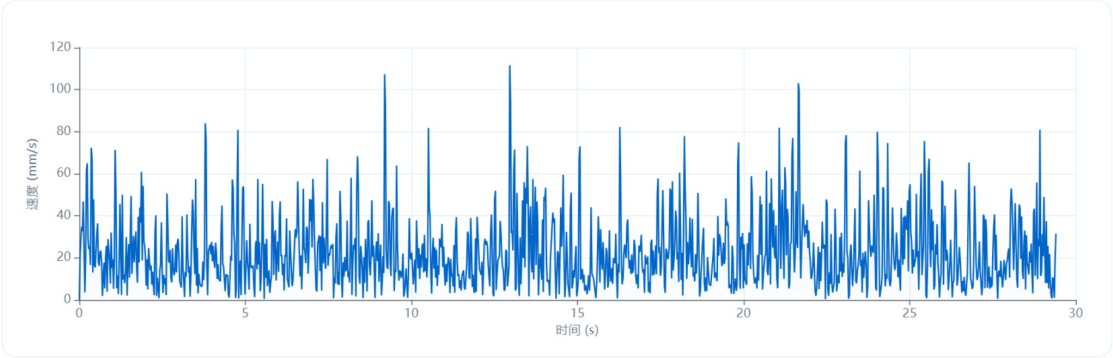

COP 参数表

OneStep Report - 参数

参数	左脚	右脚
压力中心轨迹长度	661.83 mm	132.26 mm
压力中心活动总面积	27.94 mm ²	55.91 mm ²
压力中心摆动稳定系数	5.09	5.19
压力中心摆动均匀系数	0.98	0.98
压力中心左右摆动幅度系数	2.97 mm	4.43 mm
压力中心前后摆动幅度系数	13.22 mm	17.98 mm
压力中心最大摆幅	0.56 mm	1.09 mm
压力中心稳定摆幅	0.11 mm	0.21 mm
压力中心最大离心	0.77 mm	0.95 mm
压力中心最小离心	0.00 mm	0.29 mm
压力中心偏移平均速度	22.67 mm/s	36.55 mm/s
压力中心摆动强度	0.29 mm	0.56 mm
压力中心左右方向标准差	0.64 mm	1.17 mm
压力中心前后方向标准差	2.79 mm	5.43 mm

参数说明

Annotation

【足弓指数(AI)】	中足面积/(前足+中足+后足面积)。数值越大表示中足接触面积越大，足弓越低。 正常值: 0.21~0.26, >0.26 提示高平足。
【足长】	足印最前端到最后端的直线距离。用于评估左右对称性、选择鞋码、定制鞋垫。
【足宽】	足印最宽处的横向距离。配合足长评估足型(宽型/窄型)，指导鞋槽选择。
【总面积】	整个足底接触面积。面积越大提示足弓越低或体重越大。 左右差异>15%需关注。
【前/中/后足面积】	脚掌不同部分和地面接触的面积大小。前足大：前脚掌负重重；中足大：足弓低；后足大：后跟承重多。
【前/中/后足压力】	各区域压力占总压力百分比。 正常前足40~50%，中足5~10%，后足40~50%。
【COP距整体中心】	单脚压力中心到双脚总压力中心的距离。距离越小，该脚承重越接近身体重心。
【左右脚前后差】	左脚COP相对右脚的前后位置差。正值：左脚靠前；负值：右脚靠前。 绝对值>2cm提示站姿不对称。
【压力中心轨迹长度】	COP移动的总路径长度。数值越大说明身体摆动越频繁，平衡控制越差。 第1阶段双脚站立实际采集30秒：≤1000mm较好，1001-1500mm轻度增加，1501-2200mm需关注，>2200mm重点关注。
【压力中心活动总面积】	COP活动范围的面积。数值越大说明摆动幅度越大，姿势稳定性越差。 老年人通常比年轻人大20~30%。
【压力中心摆动幅度系数】	COP椭圆的长轴与短轴之比。比值越大说明摆动方向性越明显。
【压力中心摆动均匀系数】	椭圆偏离圆形的程度(0~1)。越接近1说明摆动越呈线性，越接近0说明各方向摆动均匀。
【压力中心左右摆动幅度系数】	左右方向最大摆动幅度。数值越大说明左右稳定性越差。
【压力中心前后摆动幅度系数】	前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。
【压力中心最大摆幅】	COP椭圆的最大直径。代表主要摆动方向的幅度。配合长/短轴比判断摆动模式。
【压力中心稳定摆幅】	COP椭圆的最小直径。代表次要摆动方向的幅度。数值越小说明该方向控制越好。
【压力中心最大离心】	COP到COP均值点的最大距离，反映极端摆动情况。突然增大可能提示失去平衡。
【压力中心最小离心】	COP到COP均值点的最小距离。数值越小说明能够回到中心位置的能力越好。
【压力中心偏移平均速度】	COP移动的平均速度。速度越快说明姿势调节越频繁。
【压力中心摆动强度】	压力中心点偏移的均方根(RMS)，综合反映摆动强度。比平均值更敏感，临床常用。
【压力中心左右方向标准差】	左右方向位置离散度。数值越大说明左右摆动越不规律。
【压力中心前后方向标准差】	前后方向位置离散度。数值越大说明前后摆动越不规律。

AI分项分析

AI Sub-Analysis

评估等级: 正常

足弓指数接近正常范围但右足偏扁平；左右压力对称性优秀；COP轨迹长度短，姿势控制稳定性好；综合判定为正常范围

足弓结构分析

左足足弓指数0.247属于正常足弓，足弓高度适中，能够有效缓冲站立和步行时对足底的冲击，并维持合理的纵弓支撑功能。右足足弓指数0.293，超过0.26的扁平足界定值，提示右足弓结构偏平。扁平足会导致足底筋膜被动拉长，中足区域在站立时负荷增加，长期可能影响步态的推进效率，并增加足弓内侧的劳损风险。虽然当前左足代偿尚可，但双侧足弓类型不一致，值得关注日常行走中的双足受力差异。

静态负荷分布

左右脚总压力占比分别为50.1%和49.9%，整体对称性优秀，未见明显偏侧负荷。但前足/中足/后足分区压力显示：左足前足压力(49.05%)明显高于右足(38.58%)，而右足后足压力(38.29%)高于左足(30.52%)，提示左足更倾向于前掌发力，右足更依赖足跟支撑。这种前后足负荷的左右不对称，可能部分与右足扁平弓有关——足弓塌陷使身体倾向于将负荷后移以维持稳定。长期如此可能对膝盖和髋关节产生不对称的力学影响，建议关注双侧发力习惯。

姿势控制稳定性

COP轨迹长度为661.83mm（30秒采集），远低于1000mm的关注阈值，平均摆动速度22.49mm/s，最大偏移仅0.77mm，椭圆面积27.94cm²且偏心率较高(0.981)说明摆动方向较集中。综合判断姿势控制稳定性处于良好水平，站立时不需要过多的重心调节来维持平衡。正常老年男性在此年龄段，30秒轨迹长度通常在800-1200mm，本数据优于同龄人均值。尽管如此，若日常有疲劳、环境湿滑或多任务站立（如做家务），可能需要额外注意防跌倒。

分层干预建议

每日进行扶椅背单脚站立训练，每侧15秒/次，重复3组，增强踝关节和核心稳定性，特别留意右腿支撑时的稳定感。选择具有足弓支撑功能的鞋垫（尤其注意右足扁平弓），日常步行时帮助维持足弓形态并改善前后足受力均衡性。结合下肢力量训练（如靠墙静蹲、提踵练习），强化小腿肌群和股四头肌，减少因肌肉疲劳导致的晃动风险。每6-12个月复测一次静态站立平衡，观察足弓和姿势控制的变化趋势。若出现膝盖/腰背不适，建议进一步行走步态分析。

